

**SAM**<sup>®</sup>  
MEDICAL

# SAM<sup>®</sup> Pelvic Sling II

**SCHIEBEN.  
EINRASTEN.  
FIXIEREN.**

## OPTIMALE KRAFTSTABILISIERUNG

Die SAM<sup>®</sup> Pelvic Sling ist der erste und einzige kraftgesteuerte zirkumferenzielle Beckengurt. Die Schlinge bietet ein optimiertes einteiliges Design, und es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie Open-Book-Beckenringfrakturen sicher und wirksam komprimiert und stabilisiert.



## VERWENDETE TECHNOLOGIE

### AUTOSTOP-SCHNALLE


Die patentierte SAM<sup>®</sup> AUTOSTOP-Schnalle verhindert, dass die SAM<sup>®</sup> Pelvic Sling zu fest oder nicht fest genug angezogen wird. Wenn die optimale Kompressionskraft erreicht ist, werden zwei Zacken aktiviert, die mit einem hörbaren Klicken einrasten und so die richtige Anwendung bestätigen. Die Schlinge wird mit dem Klettverschlussgurt in Position fixiert.



## EIN DESIGN, DAS LEBEN RETTET

- 1 REIBUNGSARME GLEIT OberFLÄCHE AN DER RÜCKSEITE**  
Nach einem schweren Trauma wird das Anlegen durch reibungsarme Materialien an der Rückseite der Beckenschlinge erleichtert.
- 2 SAM<sup>®</sup> AUTOSTOP-SCHNALLE**  
Ein taktiles und hörbares „Klicken“ bestätigt eindeutig die korrekte Anwendung und verhindert ein zu starkes Festziehen, während gleichzeitig die optimale Kompressionskraft aufrechterhalten wird.
- 3 PRÄZISIONSGURT**  
Präzise gefertigte Löcher rasten in der AUTOSTOP-Schnalle ein und ermöglichen ein schnelles Anlegen. Sichere Befestigung mit einem robusten Klettverschlussgurt.

- 4 KONISCHES DESIGN**  
Das schmale, konisch zulaufende Vorderteil erleichtert das Anlegen eines Blasenkatheters, radiologische Interventionen, den Einsatz eines Fixateur externe und chirurgische Eingriffe im Bauchraum, ohne dass das Produkt entfernt werden muss.
- 5 RÖNTGENDURCHLÄSSIGES MATERIAL**  
Mit Ausnahme der zwei Edelstahlfedern der Schnalle sind alle Materialien röntgendurchlässig, sodass Röntgenaufnahmen und CT-Scans durchgeführt werden können, ohne dass das Produkt entfernt werden muss.
- 6 3 GRÖSSEN ERHÄLTlich**  
Die Standardgröße passt 95 % der Bevölkerung. Vervollständigen Sie den Satz mit den Größen Klein und Groß, sodass fast jeder Körpertyp abgedeckt ist.

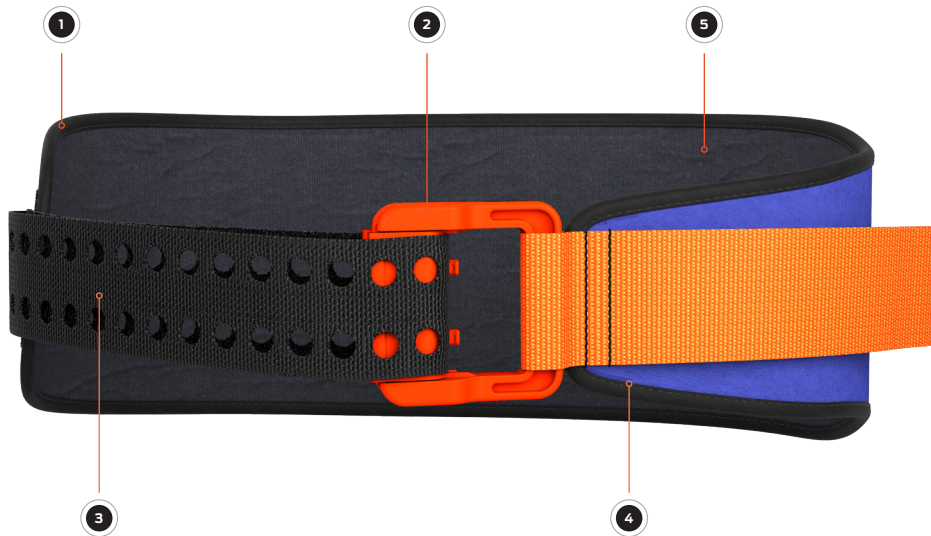

### MODELLE



ZIVIL-  
ORANGE/BLAU



MILITÄR-  
OLIVGRÜN/SCHWARZ

## PRODUKTDATEN

### VERPACKUNGSGRÖSSE

#### U. GEWICHT\*

Höhe: 14 cm (5,5 in.)  
Breite: 19 cm (7,5 in.)  
Tiefe: 9,5 cm (3,75 in.)  
Gewicht: 244–250 g (8,6–9,2 oz)\*\*

### FUNKTIONSPRINZIP

Die optimale Kraft wird bei einem zirkumferenziellen Druck von 150 N erreicht, der die Zacken der SAM<sup>®</sup> AUTOSTOP-Schnalle im Präzisionsgurt einrasten lässt.

### VERFÜGBARE MODELLE

Zivil  
Klein 69–114 cm/27–45 in. (PS300-OB-EN)  
Standard 81–127 cm/32–50 in. (PS301-OB-EN)  
Groß 91–137 cm/36–54 in. (PS302-OB-EN)

### GLOBALER VERTRIEB

USA Gebührenfrei: +1.800.818.4726  
USA Örtlich: +1.503.639.5474  
USA Fax: +1.503.639.5425  
[sammedical.com](http://sammedical.com)



Emergo Europe, Prinsessegracht 20,  
2514 BH, Den Haag, Niederlande



RÖNTGENDURCHLÄSSIG



MR-CONDITIONAL (BEDINGT MR-SICHER) 3T

SAM Medical Products<sup>®</sup>  
12200 SW Tualatin Rd., Ste 200  
Tualatin, OR 97062, USA

### Militär

Standard 81–127 cm/32–50 in.  
(PS301-OD-EN)

\* Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Fertigungsprozess.

\*\* Gewicht variiert nach Größe (Klein, Standard, Groß)

SAM<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke in den USA und anderen Ländern.

©2019 SAM Medical Products. Alle Rechte vorbehalten.